

## EASY-MCA 多道分析仪初始化说明


- 1、MAESTRO 软件无法自动识别新安装设备,因此使用前需要对设备进行初始化。
- 2、首先用USB数据线将计算机和EASY-MCA主机相连接,需要主要的是, 尽量不要将 USB 数据线连接至计算机 USB3.0 端口(蓝色),应连接至 USB2.0 端口(黑色)。因为前者可能会导致各种错误。
  - 3、连接 EASY-MCA 主机与电源线并上电。
- 4、打开开始菜单,运行 MAESTRO 目录下的 MCB Configulation 初始化程序。

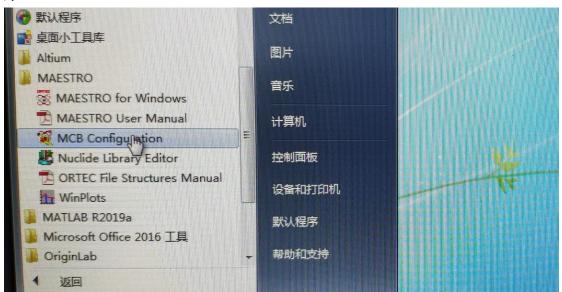


5、在初始化程序窗口中会显示已经连接设备的序列号,用鼠标选中。

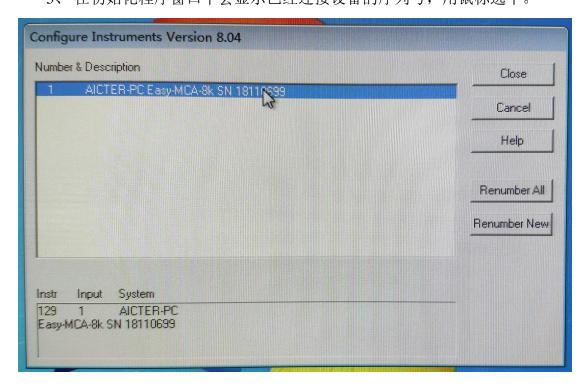

6、点击右侧 Renumber All 按钮

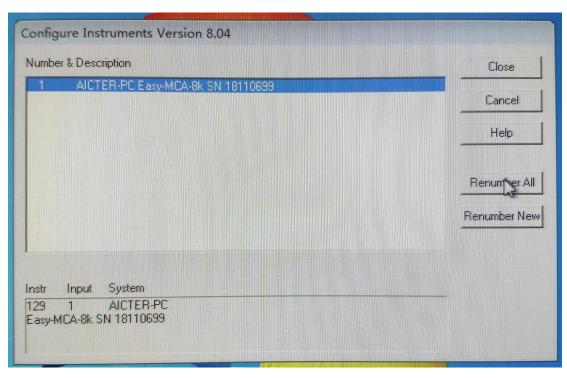

7、此时屏幕左上角会跳出提示对话框,点击 OK 继续

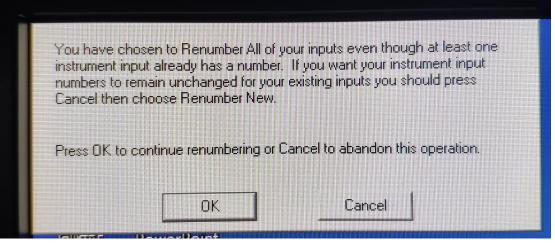

8、完成后关闭初始化程序,打开 MAESTRO 主程序,可在下拉菜单中看到已经完成初始化的设备,用鼠标选中。之后就可以开始进行多道分析测量了。

